

精密尿量計付閉鎖式導尿バッグ

フジガード 500



FUJIGUARD 500—Teardrop Shape 2000ml.Bag with Preconnected 500ml.Urine Meter

LATEX FREE ラテックスフリー

500ml ユーリンメーター


〈フジガード500の特徴〉



500ml の精密尿量計

容量 500ml と大容量なため、尿量の測定が安心です。

目盛は、60mlまでは1ml単位、100mlまで2ml単位、500mlまで10ml単位です。

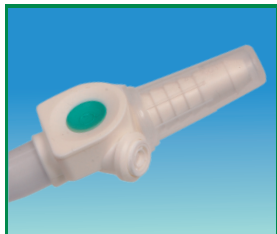

ニードルレス採取ポート

ニードルレス サンプリングポートを採用しました。針無しシリンジで容易に採取可能な安全設計です。又、アスピレーション ベント付でチューブ内の尿滞留を防止します。



導尿チューブクランプ

ワンタッチクランプを採用しました。新鮮尿採取時等に片手で閉めることができます。



2つのハンガーフック

精密尿量計は水平を保ち、尿量の確認が容易です。マジックベルトで簡単に掛けることもできます。



ワンタッチ クレム

ドレーンチューブのクレムは、ワンタッチ式です。on/off 操作は片手で容易に行えます。

品 番	品 名	仕 様	包 装
EA6050	フジガード 500	500ml 精密尿量計付 2000ml 閉鎖式導尿バッグ	10セット (箱)

〈使用上の注意〉

- ・EOG 滅菌済です。再使用しないでください。
- ・包装が破損や汚損している場合は使用しないでください。
- ・使用前にドレーンチューブが閉まっていることを確認してからご使用ください。

本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

輸入販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4 丁目 -1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店