

酸素吸入用マスク カニユール

LATEX
FREE ラテックスフリー

豊富な品揃えで、用途にあったタイプを選択できます。

柔軟で軽量ソフトなやさしい素材です。

酸素チューブはキンク防止のため内腔を星型に加工してあります。

全ての素材はラテックスフリーなので安心してお使いいただけます。


酸素吸入用マスク・カニューレ

■ 酸素マスク(スイベルコネクタ)



推奨酸素流量(L/分)		
酸素流量 L/分	酸素濃度(%) 成人用	酸素濃度(%) 小児用
6	40	40
8	50	50
10	60	50

360度
回転式

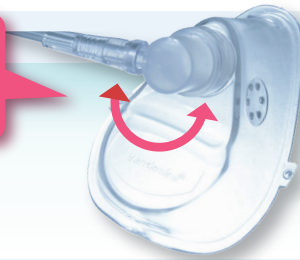

360度回転式なので、
酸素チューブの向きを
自由に変わります。

- 360度回転するスイベルコネクタ付中濃度酸素マスクです。
- チューブ角度を自由に調節でき、邪魔になりません。
- 酸素チューブ(2.1m長)の内腔は星形状で折れたりキンクしません。
- 金属は使用していません。(MRI対応)
- 可塑剤DEHP/ラテックスフリーの安心素材です。

品番	用途	仕様	包装
032-10-002J	成人用	回転式 酸素チューブ2.1m付	50個/箱
032-10-009J	小児用	回転式 酸素チューブ2.1m付	20個/箱

■ 販売名：酸素マスク(スイベルコネクタ)
 ■ 医療機器認証番号 230AGBZX00057000
 輸入先：フレキシケア メディカル社

■ 中濃度酸素吸入用マスク



酸素流量 L/分	酸素濃度 %
5~6	40
6~7	50
7~8	60


- 柔軟でソフト軽量な中濃度酸素マスクです。
- ノーズクリップは患者の輪郭に合わせフィットします。
- 2.1mのシュアフローO₂チューブ付きとチューブなしがあります。
- シュアフローO₂チューブはキンク防止用に内腔を星型に加工してあります。

品番	用途	仕様	包装
HT1040	成人用	中濃度 酸素チューブなし	50個/箱
HT1041	成人用	中濃度 酸素チューブ	50個/箱
HT1042	小児用	中濃度 酸素チューブなし	20個/箱
HT1043	小児用	中濃度 酸素チューブ	20個/箱

品番	用途	仕様	包装
HT1041F	成人用	中濃度 酸素チューブ	50個/箱
HT1043F	小児用	中濃度 酸素チューブ	20個/箱

■ 販売名：酸素吸入用マスク ■ 医療機器認証番号 22000BZX00265000
 輸入先：エヴィオン メディカル社

■ 中濃度酸素カプノマスク

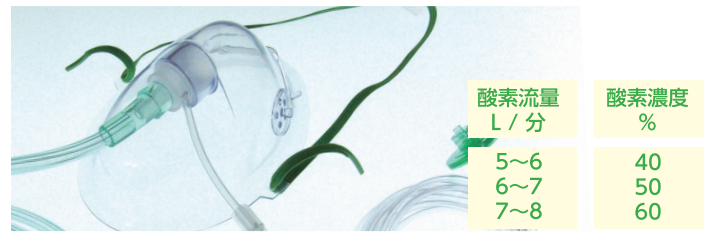


酸素流量 L/分	酸素濃度 %
5~6	40
6~7	50
7~8	60

- CO₂モニタリングポート付の中濃度酸素マスクです。
- 酸素の供給をするとともに呼気からの二酸化炭素の収集が出来ます。
- CO₂モニタリングポート部はルアーコネクタです。

品番	用途	仕様	包装
HT1031	成人用	カプノマスク/CO ₂ モニタリングポート/ 酸素チューブ	50個/箱
HT1033	成人用	カプノマスク/CO ₂ モニタリングポート/酸素チューブ/GSL※/フィルター	50個/箱
HT1051	小児用	カプノマスク/CO ₂ モニタリングポート/ 酸素チューブ	20個/箱
HT1053	小児用	カプノマスク/CO ₂ モニタリングポート/ 酸素チューブ/GSL※/フィルター	20個/箱


■ 販売名：酸素吸入用マスク ※GSLはガスサンプリングライン
 ■ 医療機器認証番号 22000BZX00265000
 輸入先：エヴィオン メディカル社

■ 高濃度酸素吸入用マスク

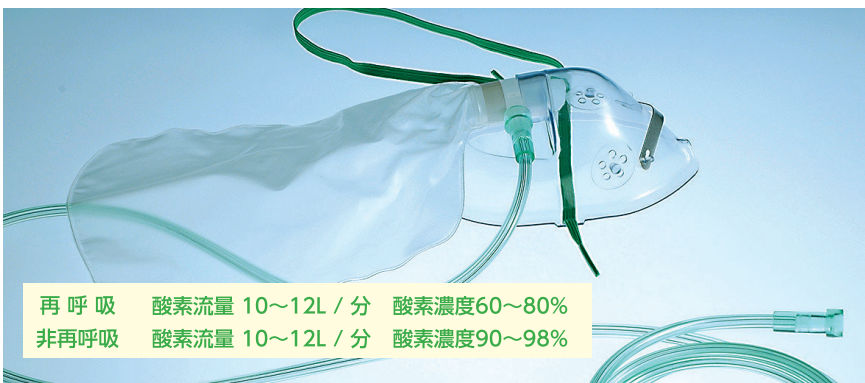

再呼吸	酸素流量 10~12L/分	酸素濃度60~80%
非再呼吸	酸素流量 10~12L/分	酸素濃度90~98%

- 高濃度の酸素吸入に適したリザーバーバッグ付きのマスクです。
- キット内容:マスク、1Lリザーバーバッグ、2.1mシュアフローO₂チューブ
- 再呼吸タイプと非再呼吸タイプの2種類があります。
- 非再呼吸タイプは3カ所にバルブが付いています。(マスク2カ所、リザーバー1ヶ所)

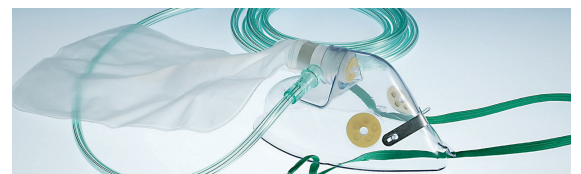

品番	用途	仕様	包装
HT1085	成人用	再呼吸 酸素チューブ	25個/箱
HT1086	小児用	再呼吸 酸素チューブ	10個/箱
HT1095	成人用	非再呼吸 3バルブ 酸素チューブ	25個/箱
HT1096	小児用	非再呼吸 3バルブ 酸素チューブ	10個/箱

品番	用途	仕様	包装
HT1085F	成人用	再呼吸 酸素チューブ	25個/箱
HT1086F	小児用	再呼吸 酸素チューブ	10個/箱
HT1095F	成人用	非再呼吸 3バルブ 酸素チューブ	25個/箱
HT1096F	小児用	非再呼吸 3バルブ 酸素チューブ	10個/箱

■ 販売名：酸素吸入用マスク ■ 医療機器認証番号 22000BZX00265000
 輸入先：エヴィオン メディカル社




■ エアロゾルマスク

- エアロゾル療法用にデザインしてあります。
- 柔軟でソフト軽量の素材です。
- ノーズクリップは患者の輪郭に合わせフィットします。
- 内径22mmの蛇管と接続できます。

品番	用途	仕様	包装
HT1083	成人用	エアロゾル用 22mmコネクタ	50個 / 箱
HT1080	小児用	エアロゾル用 22mmコネクタ	20個 / 箱

■ 販売名：酸素吸入用マスク

■ 医療機器認証番号 22000BZX00265000 輸入先：エヴィオン メディカル社

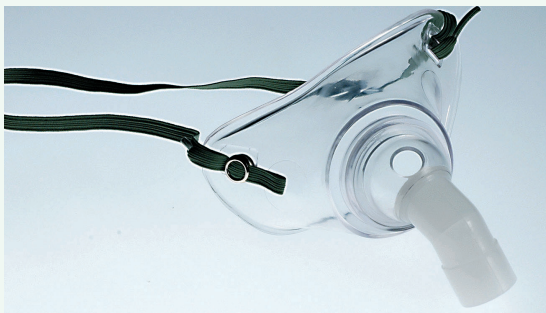

■ トラキオストミーマスク

- 気管切開術後または喉頭切除術後のエアロゾル療法用にデザインしてあります。
- コネクタは360度回転式です。内径22mmの蛇管と接続できます。

品番	用途	仕様	包装
HT1060	成人用	エアロゾル気管切開用 22mmコネクタ	50個 / 箱
HT1070	小児用	エアロゾル気管切開用 22mmコネクタ	20個 / 箱

■ 販売名：トラキオストミーマスク

■ 医療機器認証番号 229AGBZX00061000 輸入先：エヴィオン メディカル社



■ ベンチュリー吸入用マスク


- 酸素濃度をダイリューターで設定できるベンチュリーマスクキットです。
- キット内容:マスク、15cmフレックスチューブ、ダイリューター6種、シユアフローO₂チューブ、エアロゾルアダプター

品番	用途	仕様	包装
HT1710	成人用	ベンチュリーキット 酸素チューブ	25個 / 箱
HT1711	小児用	ベンチュリーキット 酸素チューブ	10個 / 箱

品番	用途	仕様	包装
HT1710F	成人用	ベンチュリーキット 酸素チューブ	25個 / 箱
HT1711F	小児用	ベンチュリーキット 酸素チューブ	10個 / 箱

■ 販売名：ベンチュリー吸入用マスク

■ 医療機器認証番号 22000BZX00266000 輸入先：エヴィオン メディカル社

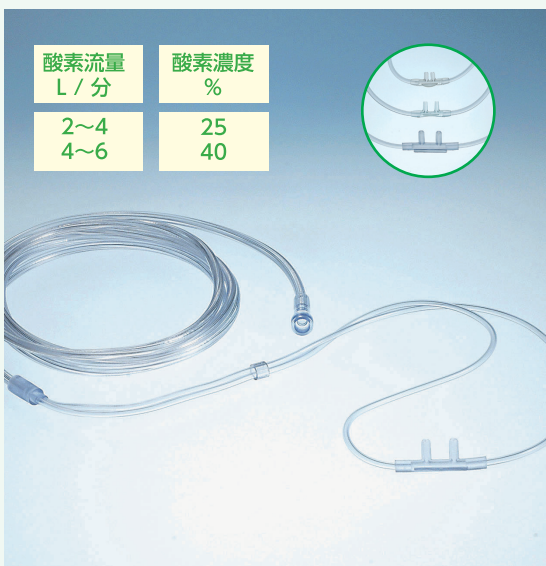

■ シルキーソフト 酸素カニューレ

- 2.1mシユアフローO₂チューブ付の鼻カニューレです。
- 柔軟で軽量ソフトな素材です。
- チップ部は違和感を無くするため特に柔らかな素材を使用しています。
- チューブは内腔が星型のシユアフローO₂チューブを使用していますので、柔軟でありながらキンクしづらく安心です。

品番	用途	仕様	包装
HT1012	成人用	カニューレ 酸素チューブ	50個 / 箱
HT1013	小児用	カニューレ 酸素チューブ	20個 / 箱
HT1014	新生児用	カニューレ 酸素チューブ	20個 / 箱

品番	用途	仕様	包装
HT1012F	成人用	カニューレ 酸素チューブ	50個 / 箱
HT1013F	小児用	カニューレ 酸素チューブ	20個 / 箱
HT1014F	新生児用	カニューレ 酸素チューブ	20個 / 箱

■ 販売名：シルキーソフト 酸素カニューレ

■ 医療機器認証番号 22000BZX00264000 輸入先：エヴィオン メディカル社

■ ネブライザーシステム

- 小型軽量のネブライザーシステムです。
- 粒子サイズは50%が2.88 μ m以下です。(流量7L /分)
- 薬液平均投与量は0.35mL /分です。(推奨流量6~9L /分)
- チューブはキンク防止用に加工した2.1mシュアフローO₂チューブです。
- ラテックスフリーなので安心してお使いいただけます。



■ ネブライザーマスクキット

- マスクでの吸入用キットです。
- キット内容:マスク、ネブライザー、2.1mシュアフローO₂チューブ
- マスクは軽量ソフトな素材です。

品番	用途	仕様	包装
HT1805	成人用 マスク吸入用	酸素チューブ	25個 / 箱
HT1807	小児用 マスク吸入用	酸素チューブ	10個 / 箱

- 販売名: ネブライザー キット
- 医療機器届出番号 13B1X00008000003 輸入先: エヴィオン メディカル社




■ ミニネブライザーキット

- マウスピースでの吸入用キットです。
- キット内容:マウスピース、Tピース、ネブライザー

品番	用途	仕様	包装
HT1801	マウスピース吸入用	酸素チューブなし	50個 / 箱
HT1806	マウスピース吸入用	2.1m酸素チューブ付き	50個 / 箱
HT1811	ネブライザー ※マウスピース・Tピースなし	2.1m酸素チューブ付き	50個 / 箱

- 販売名: ネブライザー キット
- 医療機器届出番号 13B1X00008000003 輸入先: エヴィオン メディカル社

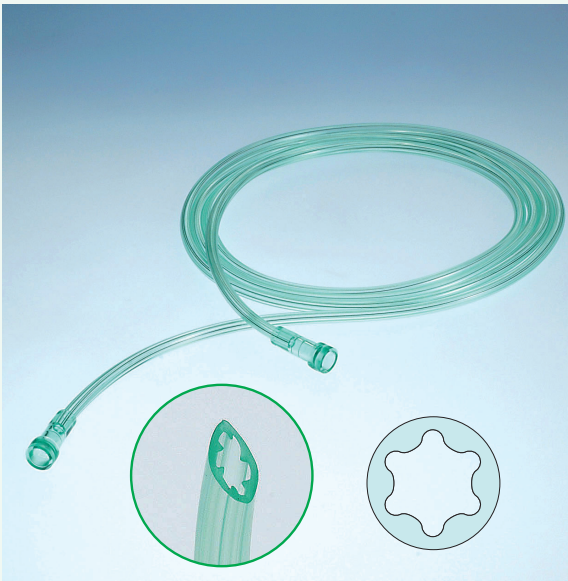

■ シュアフローO₂チューブ

- チューブ素材は柔軟で扱いやすい酸素チューブです。
- キンク防止のため、内腔を星型に加工してあります。
- コネクタはスタンダードと片側フレアーの2種類があります。
- チューブは酸素用の透き通ったグリーン色です。

品番	仕様	包装
HT1115	酸素チューブ 2.1m	50個 / 箱
HT1118	酸素チューブ 4.2m	50個 / 箱
HT1119	酸素チューブ 7.6m	25個 / 箱
HT1110	酸素チューブ 10.0m	20個 / 箱

品番	仕様	包装
HT1115F	酸素チューブ 2.1m	50個 / 箱
HT1118F	酸素チューブ 4.2m	50個 / 箱
HT1119F	酸素チューブ 7.6m	25個 / 箱
HT1110F	酸素チューブ 10.0m	20個 / 箱

- 販売名: 酸素吸入用マスク
- 医療機器認証番号 22000BZX00265000 輸入先: エヴィオン メディカル社

酸素チューブのコネクタは、スタンダード コネクタとフレアー コネクタの2種類からお選びいただけます。

■ スタンダード コネクタ



■ フレアー コネクタ



フレアーコネクタの商品番号は末尾にFがつきます。